



STYRKEOMFÅNG: - 8 till + 8 D

ADDITION: 0,75 till 6,0 D

FÖRSTORING: ca 3 % alternativt ca 6 %

FILTER: Comfortfilter C1

BEHANDLING: ML Prima

KORREKTIONSTYP: Progressiv, bifokal och enkelslipat

Personer med AMD (Age related Macular Degeneration – Åldersrelaterad makuladegeneration) upplever ofta problem med att hitta vanlig optik som ger dem tillfredsställande synkvalitet. Normal optik kan hjälpa en del men ofta behöver man mer hjälp än bara glasögon med styrkekorrektur. Lyckligtvis finns det mer att ta till.

Därför erbjuder vi AMD Comfort.

AMD Comfort erbjuder personer med AMD en klar förbättring i synskärpa, förbättrat kontrastseende och bättre komfort. AMD Comfort är en lösning som är lätt att förstå, lätt att vänja sig vid, lätt att prova ut och sist men inte minst, lätt att beställa.

AMD COMFORT – EN SPECIELL TYP AV LINS

AMD Comfort är en nyutvecklad lins från Multilens som erbjuder de som lider av AMD en bättre synförmåga och bättre synkomfort. Detta åstadkoms främst av 4 speciella linsegenskaper:

KOMFORTFILTER

Den speciellt framtagna filterfärgen erbjuder bästa möjliga skydd mot UV-ljus och tar bort den obehagliga bländningen man kan uppleva i starkt dagsljus. Komfortfiltret reducerar markant mängden blått ljus som också kan upplevas som bländande samtidigt som tillräckligt släpps igenom för att behålla färgseendet.

FÖRSTORING

AMD Comfort ger en förstoringseffekt som gör att en större del av näthinnan blir stimulerad vilket underlättar seendet. Förstoringen är tillräckligt stor för att göra en synbar skillnad men inte så stor att synfältet blir lidande.

Förstoringen uppnås genom att slipa linsen något kupigare och tjockare än normalt.

Det finns 2 olika förstoringsgrader tillgängliga, AMD-I och AMD-II. AMD-I innebär en balans mellan förstoring och kosmetiskt utförande medan AMD-II medför större förstoring men gör också linsen tjockare.

AMD-I innebär en förstoring på ca 3 % och AMD-II innebär ca 6 %. Exakt förstoring kan variera något pga styrka och val av korrektionstyp.

ANTIREFLEXBEHANDLING

Antireflexbehandling är standard på AMD Comfort för att öka ljustransmissionen och förbättra synkvaliten.

MED INDIVIDUELL KORREKTION

När en person inte har fullgod syn är normalt det första man gör en styrkebestämning för att se om synfelet går att korrigeras med någon form av optik. Det är detsamma med AMD-patienter, man bör alltid hitta den optimala korrektionen. AMD Comfort beställs alltid med rätt styrka för att få optiken att fungera så optimalt som möjligt.

ENKELT ATT ANVÄNDA, ENKELT ATT BESTÄLLA

AMD Comfort-linserna består av beprövad optisk teknik paketerad för att vara enkelt att hantera men ändå effektivt för att få optimal synfunktion för AMD-patienter (och andra med nedsatt synfunktion). Paketeringen gör konceptet lätt för optikern att förstå och lätt för patienten att vänja sig vid.

ENKELT ATT PROVA UT


För att prova ut AMD Comfort finns det enkla provset man kan använda. Sätt patientens styrkor i en provbåge och håll en flirp bestående av AMD Comfort med en av de båda förstoringsgraderna framför och låt patienten bedöma. Finns även som flip-up att använda till patientens egna bugar

ENKELT ATT BESTÄLLA

För optikern är det lika enkelt att beställa AMD Comfort som det är att beställa en vanlig lins.

ENKELT ATT ANVÄNDA

AMD Comfort kräver ingen tid för tillvänjning för användaren. Man kommer direkt att uppleva bättre komfort, bättre kontrast och en bättre synkvalite.

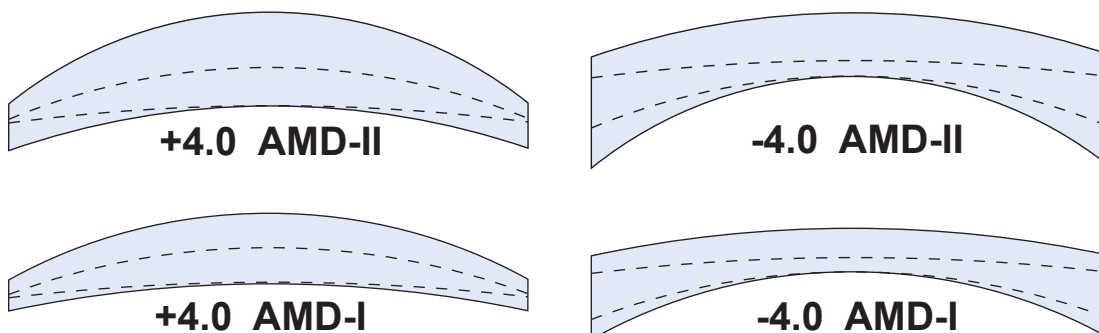

Exempel på förändring av tjocklek och kurvatur på linsen med AMD Comfort.

AMD COMFORT-LINSEN

AMD Comfort baseras på produkter som finns i Multilens produktprogram. Vi har valt ut en progressiv variant, en enkelslipad variant och 2 varianter av bifokala glas i vår paketering. Med dessa kan du uppfylla de allra flesta behov.

Nedan finner du den mest relevanta informationen kring de olika paketen

AMD COMFORT PROGRESSIV

GRUNDDSIGN:
ML Classic Comfort

AMD VERSIONER:
AMD-I och AMD-II

KORRIDORVARIANTER:
Minsta monteringshöjd 16 mm eller 20 mm

ADDITION:
0,75 D till 4,0 D

TRANSITIONS SOM TILLVAL: Ja

POLARISERANDE SOM TILLVAL: Ja

STYRKEOMRÅDE:
Se tabell

AMD COMFORT ENKELSLIPAT

GRUNDDSIGN:
ML Classic

AMD VERSIONER: AMD-I och AMD-II

TRANSITIONS SOM TILLVAL: Ja

POLARISERANDE SOM TILLVAL: Ja

STYRKEOMRÅDE:
Se tabell

AMD COMFORT BIFOKAL

GRUNDDSIGN:
ML Classic S28, ML Classic C28 samt ML Classic S28 Hög Add

AMD VERSIONER: AMD-I och AMD-II

ADDITION: 0,75 till 4,0 för S28 och C28. 4,5 till 6,0 för S28 Hög Add

TRANSITIONS SOM TILLVAL:
Ja, på C28

POLARISERANDE SOM TILLVAL:
Ja, på S28

STYRKEOMRÅDE SOM TILLVAL:
Se tabell

KRITERIER FÖR AMD COMFORT

Huvudkriterierna för val av linser i våra AMD Comfort-paket är:

PROGRESSIVA

- Stort synfält
- Hård design
- Möjlighet till hög addition
- Möjlighet till transitions och polariserande

BIFOKALA

- Möjlighet till hög addition
- Möjlighet till transitions och polariserande

ENKELSLIPADE

- Möjlighet till transitions och polariserande

AMD comfort	+ Sfär	- Sfär	Prisma
Progressiv AMD I	+8	-8	4
Progressiv AMD II	+6	-6	3
Progressiv AMD I med pol eller trans.	+6	-6	4
Progressiv AMD II med pol eller trans.	+4	-4	3
Enkelslipat AMD I	+8	-8	4
Enkelslipat AMD II	+6	-6	3
Enkelslipat AMD I med pol eller trans.	+6	-6	4
Enkelslipat AMD II med pol eller trans.	+4	-4	3
Bifocale S28 AMD I, utan/med pol	+8	-8	4
Bifocale S28 AMD II, utan/med pol	+6	-6	3
Bifocale C28 AMD I, utan/med transition	+8	-8	4
Bifocale C28 AMD II, utan/med transition	+6	-6	3
Bifocale S28 AMD I, utan pol Hög Add	+8	-8	2
Bifocale S28 AMD II, utan pol Hög Add	+6	-6	2

Styrkegränser för AMD Comfort.


Notera följande:

- Cylinder upp till - 6 är möjligt så länge inte starkaste snitt överstiger - 6
- För styrkor utanför ovanstående gränser, kontakta oss eftersom det kan vara möjligt
- Diameter upp till 75 mm är tillgängligt (73 mm för polariserande). För stora diameter kan Myosoft vara nödvändigt
- Alla AMD Comfort görs i index 1.5
- Max + sfär påverkas av additionsvärdet: Add + 2,0 minskar styrkegränsen ca 1,0 D. Add + 3,0 minskar med ca 2,0 D. Add + 4,0 minskar med ca 3,0 D
- Se Multilens glasprogram för vilka varianter av polariserande och transitions som finns

AMD COMFORT PROVSET

AMD COMFORT FLIP-UP TESTBOX

2 par AMD Comfort flip-up Large med planstyrka (AMD-I och AMD-II) i en låda – artikelnummer 09050

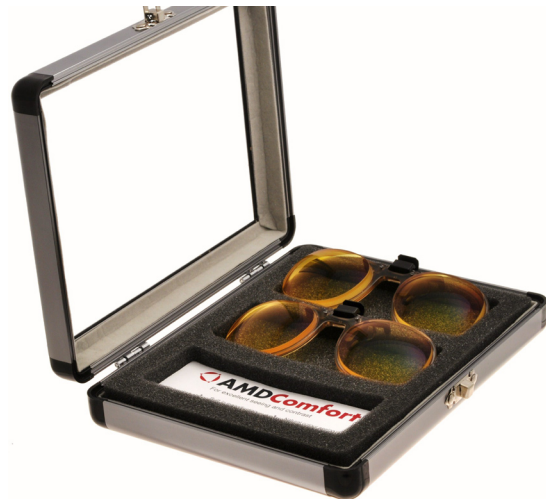**09050**

AMD-Comfort testbox

AMD COMFORT FLIP-UP

AMD Comfort lösa flip-up Large med planstyrka, AMD I och AMD II

**09003**

Flip-up Large med AMD-I – artikelnummer 09003

**09006**

Flip-up Large med AMD-II – artikelnummer 09006

AMD COMFORT FLIRPKIT

En flirp med plana AMD Comfort-linser. Ett par med AMD-I och ett par med AMD-II – artikelnummer 09036.

**09036**

AMD-Comfort double test frame